

クイックエイド  
Quick aid

スピード  
乾燥

クリーン  
除菌

パワフル  
脱臭

# 汗と湿気は補聴器故障の原因！

## 素早い乾燥で汗や湿気をシャットアウト

### クイックエイドの機能

#### ● 循環ファン

ケース内の空気を循環させて補聴器表面をやさしく乾かせます。特殊乾燥剤と融合することで、乾燥効果がアップ。

#### ● 紫外線LED

蛍光管と比べ長寿命で省エネの為、環境にやさしい材料です。ハイブリッドシートと融合することで、除菌効果が大幅アップ。

#### ● ハイブリッドシート

活性炭や水酸化チタン、ごく微量のヨウ素などを配合し、クイックエイド専用に開発された複合素材です。

注) ヨウ素アレルギーの方は医師にご相談ください。

#### ● 特殊乾燥剤


一般的なシリカゲル剤と比べ水分を素早く吸着させる特徴があり、補聴器の湿気対策にもっとも適した乾燥能力の高い乾燥剤です。

#### ● 湿度検知紙

乾燥剤の交換目安に最適。ピンク色になると交換をお知らせ。



交換目安はおよそ2ヶ月に1度ですが、季節により変化が異なる場合がございます。

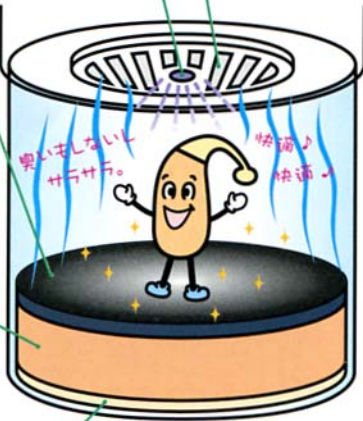

### クイックエイドの仕様

#### ■ 簡単キャップ開閉



#### ■ 空気電池置きに便利なマグネットシート付

クイックエイドは乾燥効果が高い為、補聴器に空気電池を入れたままご利用になりますと、空気電池の寿命に影響を及ぼす場合がございますので、ご面倒でも本体天面のマグネットシートに置いてご利用ください。

#### ■ 本体（電池使用時）

- ・運転時間：約20分で自動OFF。
  - ・電池寿命：1日1回のご利用で約30日。
- 注) 新品のアルカリ電池を使用した場合。

■QA-221W 希望小売価格 8,080円  
(税抜7,482円)

#### ■ クレイドル（AC電源使用時）

- ・運転時間：約1時間で自動OFF。
- クレイドル使用時は、本体に電池が入ってもクレイドル（AC電源）が優先になります。

電源ONで、あとは機械が自動的に運転。



補聴器の管理はこれ1台でOK！